

Catálogo



Hybrid Implant System

ÍNDICE

INSTITUCIONAL



3

NOSSO PORTFÓLIO



5

SOBRE O HIS



6

DIFERENCIAIS



9

EMBALAGEM



10

HIS - STANDARD



11

HIS - SLIM



12

HIS - SHORT



13

COMPONENTES

Cicatrizadores



14

COMPONENTES

Prótese Cimentada



15

COMPONENTES

Prótese Cimentada/Parafusada



20

COMPONENTES

Prótese parafusada



24

COMPONENTES

Prótese Overdenture



32

KIT CIRÚRGICO



34

INSTRUMENTAL CIRÚRGICO



35

INSTITUCIONAL



Em 17 de junho de 1998, o Dr. Adolfo Embacher Filho, um dos pioneiros na implantodontia brasileira, fundou a Emfils com uma visão clara: oferecer soluções inovadoras que facilitassem a vida dos cirurgiões dentistas. Assim nasceu o sistema de implantes Colosso, prático e eficaz, alinhado com as necessidades do cenário nacional.

Inicialmente operando como distribuidora, a Emfils logo percebeu a necessidade de garantir um controle de qualidade excepcional. Em 2000, inaugurou sua própria fábrica, permitindo que o Dr. Adolfo transformasse sua tese de doutorado em produtos que revolucionaram o mercado.

Na década de 2000, sob a liderança de Fábio Embacher, a Emfils alcançou um crescimento expressivo: ampliou receitas, conquistou clientes, obteve certificações e estabeleceu parcerias científicas, consolidando um portfólio único. Esse sucesso abriu caminho para uma expansão ainda maior.



INSTITUCIONAL

O ponto de virada chegou em 2019, quando uma parceria estratégica com a Alliage, líder nacional em equipamentos odontológicos, transformou a Emfils em Medens. Essa união multiplicou a capacidade produtiva e manteve a essência inovadora da empresa, reforçada por investimentos contínuos em pesquisa e desenvolvimento.

Hoje, a Medens é referência no mercado de implantes, sustentada por seu propósito de promover saúde e bem-estar. Nossa visão é estar entre as maiores do Brasil, guiados por valores como integridade, resiliência e excelência. Nossa liderança, composta por dentistas experientes, assegura que cada produto seja desenvolvido para facilitar a rotina clínica com soluções acessíveis e eficazes.

Com a nova fábrica em Ribeirão Preto, a Medens amplia sua capacidade produtiva, pronta para reabilitar sorrisos por todo o mundo. Para nós, cada dentista, cada consultório e cada sorriso são únicos. Continuamos com a missão de levar a implantodontia para o maior número de pessoas, fazendo o mundo sorrir.



TECNOLOGIA QUE INTEGRA, INOVAÇÃO QUE TRANSFORMA!

Simplifique sua rotina clínica com um sistema completo! Compatível com as principais marcas do mercado, o HIS traz a praticidade que você precisa para otimizar seus procedimentos. Com o mesmo encaixe para todas as linhas e uma única chave hexagonal para os parafusos, você ganha mais eficiência, menos complicação e resultados superiores em cada etapa.

RESULTADO DE PESQUISA RIGOROSA:

Mais de 10 anos de pesquisas contínuas criaram um produto que entrega previsibilidade e resultados confiáveis em cada etapa.

acesse aqui o caderno científico

COMPATIBILIDADE AMPLA

Cone Morse de 11,5°, o HIS é compatível com as principais marcas do mercado.

PRATICIDADE CLÍNICA:

3 modelos (Standard, Slim e Short) com o mesmo encaixe, kit cirúrgico único e reversibilidade protética.

TECNOLOGIA DE PONTA:

A nova macrogeometria Fusion e a nova superfície TooFast proporcionam osseointegração acelerada e alta estabilidade primária



**INSTRUMENTAL
CIRÚRGICO**




**IMPLANTES
CONE MORSE 11,5°**



**COMPONENTES
PROTÉTICOS**



TECNOLOGIA QUE **INTEGRA**, INOVAÇÃO QUE **TRANSFORMA**.

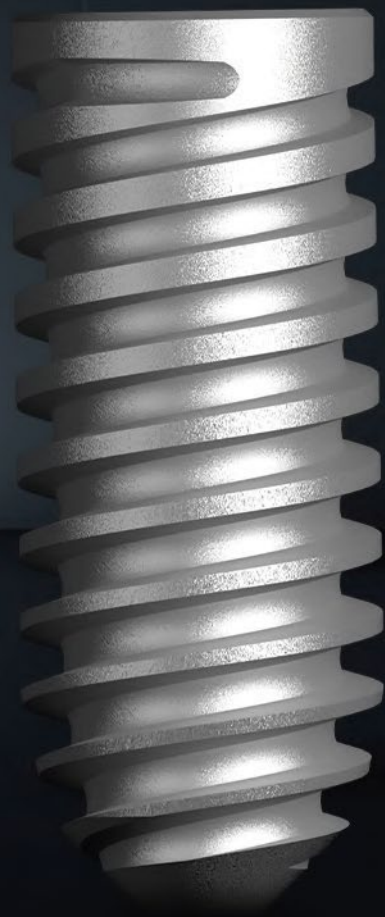

O novo implante HIS é resultado de um rigoroso processo de pesquisa e desenvolvimento. Com o padrão Cone Morse de 11,5°, o HIS é compatível com as principais marcas do mercado.

O design inovador do HIS incorpora a macrogeometria Fusion, com câmaras que proporcionam uma formação óssea rápida e previsível, mantendo a maior estabilidade primária do mercado. Isso é possível graças ao duplo passo de rosca e ao perfil trapezoidal progressivo.

A superfície TooFast foi desenvolvida para promover rápida regeneração óssea ao facilitar a fixação eficiente do coágulo sanguíneo. Além disso, favorece a adesão, proliferação e diferenciação celular durante a osseointegração.

Disponível em três modelos — Standard, Slim e Short — todos com o mesmo ângulo e rosca de encaixe, a linha HIS chega para garantir a melhor experiência para seus pacientes e transformar o seu dia a dia clínico.

FUSION

MACRO GEOMETRIA

A **Macrogeometria Fusion** oferece uma combinação única de câmaras de osseointegração e alta estabilidade primária. Passo de rosca duplo e perfil progressivamente trapezoidal, garantindo **alta estabilidade na formação de câmara**.




Passo de rosca duplo



Apical Cortante



Cervical Compactante

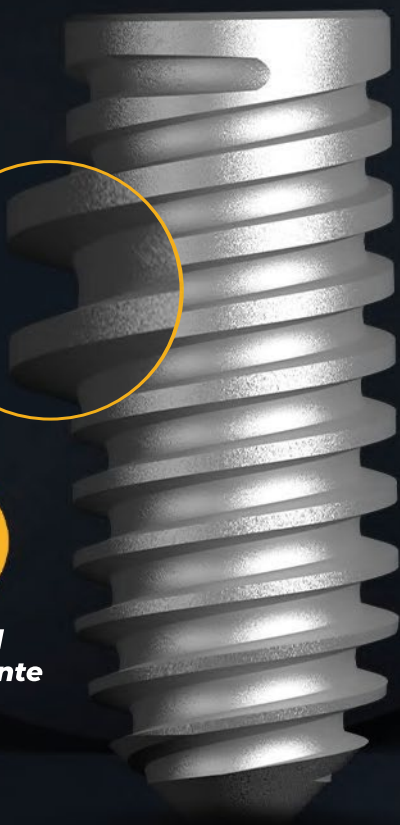

Torque






Estudos de torque revelaram que o perfil de rosca irregular da macrogeometria Fusion, aliado a câmaras de osseointegração regular assegura uma inserção de implantes com estabilidade primária incomparável.

TOOFAST

SUPERFÍCIE

A **Superfície TooFast** foi desenvolvida para fornecer a microgeometria ideal para as câmaras de osseointegração dos implantes HIS, garantindo uma **fixação eficiente** do coágulo sanguíneo, que promove a regeneração óssea. Essa superfície assegura a **adesão, proliferação e diferenciação celulares** durante a osseointegração.

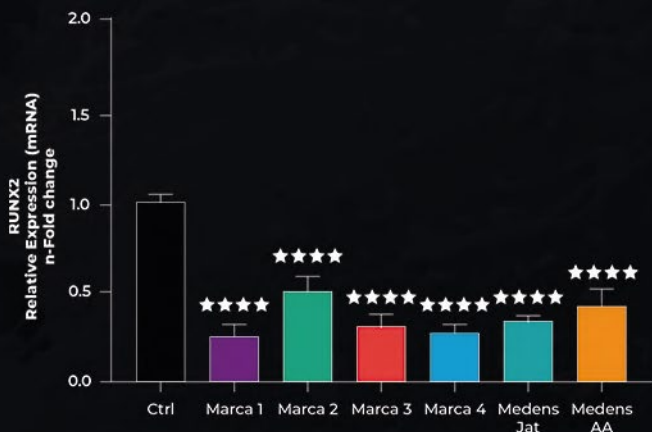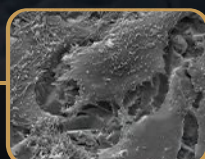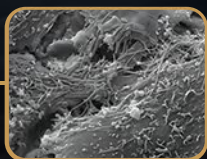

O Implante HIS foi rigorosamente testado e comparado com os principais líderes do mercado, demonstrando performance equivalente ou superior em todos os aspectos avaliados.



REVERSIBILIDADE

O parafuso Saca Pilar foi desenvolvido para proporcionar reversibilidade e simplificar cirurgias de extração do implante.

3 MODELOS COM ENCAIXE 11,5°

A linha de implantes HIS oferece soluções para diversas necessidades clínicas. Disponível em três versões, ela garante precisão e adaptação ideal para cada caso.



1 ÚNICO KIT CIRÚRGICO

O Kit Cirúrgico Medens comporta todos os nossos modelos de implantes e acomoda também os componentes protéticos, proporcionando praticidade durante os procedimentos cirúrgicos.

EMBALAGEM

A embalagem do HIS foi desenvolvida para **otimizar sua rotina clínica**, garantindo mais agilidade e segurança no manuseio. Seu formato retangular **facilita o armazenamento e organização**.

Todas as informações essenciais estão claramente dispostas na etiqueta, incluindo modelo, lote, dimensões e especificações técnicas do implante. Isso garante uma **identificação rápida e precisa**, facilitando o controle e a rastreabilidade durante os procedimentos.



Identificação por cores

As cores das tampas auxiliam na identificação dos diâmetros dos implantes.



Laranja
Ø**2,9** mm



Roxa
Ø**3,5** mm



Amarela
Ø**4,0** mm



Azul
Ø**5,0** mm

Etiquetas

No interior da caixa encontramos 2 etiquetas:



Uma como rotulagem, contendo informações de identificação do produto, os cumprimentos dos implantes e informações conforme legislação aplicável;




Uma com frente-verso. O verso possui 3 auto-adesivas para destacar, com as principais informações do rótulo e o n.º do lote que propicia a rastreabilidade do processo produtivo.

— Prontuário médico ou ficha técnica do paciente;

— Para ser entregue ao paciente;

— Reserva.

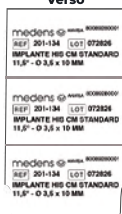

IMPLANTE HIS - CM STANDARD



Os implantes HIS CM (Cone Morse) da linha Standard são cortantes e compactantes devido ao seu perfil externo.

Totalmente osseointegráveis;
Rosca externa de duas entradas;
Passo progressivo assimétrico
crescente de apical a cervical;

Altura de câmara constante
com perfil interno cônico;
Ótima estabilidade primária;
Característica híbrida

Acompanham o
TAPA IMPLANTE




10 N.cm Torque Máximo

Acesse aqui o
Manual Clínico

Acesse aqui a
Biblioteca de IFUs

São comercializados unitariamente.
confeccionados em LIGA CONFORMAD
DE TITÂNIO 6Al 4V, conforme
Norma ASTM f-136

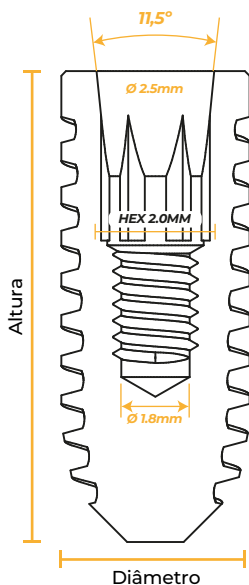

Ø3,5 mm



Ø4,0 mm



Ø5,0 mm



IMPLANTE **HIS - CM SLIM**



Os implantes HIS CM (Cone Morse) da linha Slim são cortantes e compactantes devido ao seu perfil externo.

Totalmente osseointegráveis;
Rosca externa de duas entradas;
Passo progressivo assimétrico
crescente de apical a cervical;

Altura de câmara constante
com perfil interno cônico;
Ótima estabilidade primária;
Característica híbrida

Acompanham o
TAPA IMPLANTE




10 N.cm Torque
Máximo

Acesse aqui o
Manual Clínico

Acesse aqui a
Biblioteca de IFUs

São comercializados unitariamente.
confeccionados em LIGA CONFORMAD
DE TITÂNIO 6Al 4V, conforme
Norma ASTM f-136

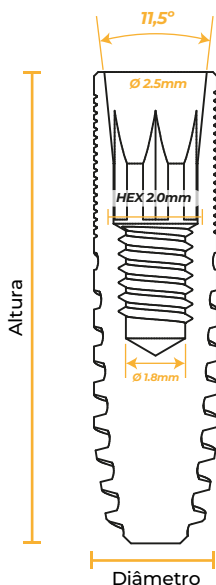

Ø2,9 mm



10,0 mm
201-334

11,5 mm
201-335

13,0 mm
201-336

IMPLANTE HIS - CM SHORT

Os implantes HIS CM (Cone Morse) da linha Short são cortantes e compactantes devido ao seu perfil externo.



Totalmente osseointegráveis;
Rosca externa de duas entradas;
Passo progressivo assimétrico
crescente de apical a cervical;

Altura de câmara constante
com perfil interno cônico;
Ótima estabilidade primária;
Característica híbrida

Acompanham o
TAPA IMPLANTE




10 N.cm Torque Máximo

Acesse aqui o
[Manual Clínico](#)

Acesse aqui a
[Biblioteca de IFUs](#)

São comercializados unitariamente.
confeccionados em LIGA CONFORMAD
DE TITÂNIO 6Al 4V, conforme
Norma ASTM f-136

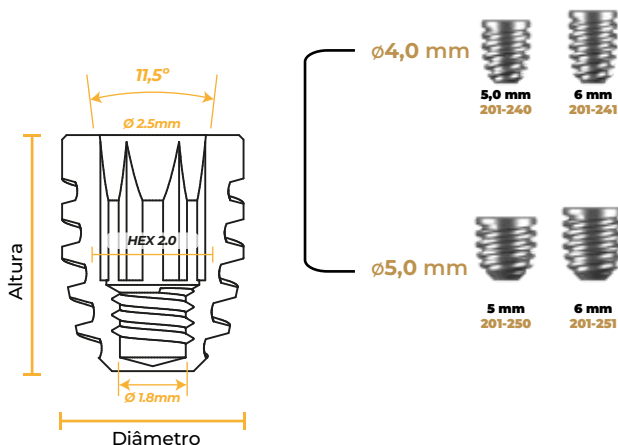

CICATRIZADORES



- Compatível com todos os implantes linha HIS: **STANDARD, SHORT e SLIM**
- Plataforma Ø3,5 e Ø4,5mm;
- Auxilia na moldagem da mucosa.

20 Torque
N.cm Máximo

	Cinta Zero*		1,5mm	2,5mm	3,5mm	4,5mm	5,5mm
Ø 3,5	261-131	261-132	261-133	261-134	261-135	261-136	
Ø 4,5	261-231	261-232	261-233	261-234	261-235	261-236	

*Cone Morse não ativo



MUNHÃO UNIVERSAL



• Com rosca interna para segurança do parafuso na instalação.

30
N.cm
Torque
Máximo

Acompanha
parafuso

Reversibilidade
com o **Saca pilar**

Prótese
unitária



Standard Slim	Cinta Zero*	1,5mm	2,5mm	3,5mm	4,5mm	5,5mm
Ø 2,9	231-087					
Ø 3,5	231-051	231-053	231-055	231-057	231-059	231-061
Ø 4,0	231-089					
Ø 5,0	231-089					

Short Ø 4,0 e Ø 5,0	238-089	238-053	238-055	238-057	238-059	238-061
-------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------



Standard Slim	Cinta Zero*	1,5mm	2,5mm	3,5mm	4,5mm	5,5mm
Ø 2,9	231-088					
Ø 3,5	231-052	231-054	231-056	231-058	231-060	231-062
Ø 4,0	231-090					
Ø 5,0	231-090					

Short Ø 4,0 e Ø 5,0	238-090	238-054	238-056	238-058	238-060	238-062
-------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------



Standard Slim	Cinta Zero*	1,5mm	2,5mm	3,5mm	4,5mm	5,5mm
Ø 2,9	231-187					
Ø 3,5	231-151	231-153	231-155	231-157	231-159	231-161
Ø 4,0	231-189					
Ø 5,0	231-189					

Short Ø 4,0 e Ø 5,0	238-189	238-153	238-155	238-157	238-159	238-161
-------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

COMPONENTES

Prótese cimentada



Munhão reto longo

Parafuso
Munhão Ø4,5
261-310

Standard Slim

Ø 2,9

Ø 3,5

Ø 4,0

Ø 5,0

Cinta **Zero***

1,5mm

2,5mm

3,5mm

4,5mm

5,5mm

231-188

231-152

231-190

231-190

231-154

231-156

231-158

231-160

231-162

Short
Ø 4,0 e Ø 5,0

238-190

238-154

238-156

238-158

238-160

238-162

*Cone Morse não ativo

COMPONENTES

Prótese cimentada



MUNHÃO UNIVERSAL ANGULADO



· Com rosca interna para segurança do parafuso na instalação.

30
N.cm Torque Máximo



Acompanha parafuso



Reversibilidade com o **Saca pilar**



Prótese unitária



Munhão angulado 17° e 30° curto

Parafuso Munhão Ø3,3 e Ø4,5
268-405

	17°		
	1,5mm	2,5mm	3,5mm
Standard Slim	241-011	241-012	241-013
	Ø 2,9	Ø 3,5	Ø 4,0 Ø 5,0
Short	247-011	247-012	247-013
	Ø 4,0	Ø 5,0	

	30°		
	1,5mm	2,5mm	3,5mm
Standard Slim	241-111	241-112	241-113
	Ø 2,9	Ø 3,5	Ø 4,0 Ø 5,0
Short	247-111	247-112	247-113
	Ø 4,0	Ø 5,0	



Munhão angulado 17° e 30° longo

Parafuso Munhão Ø3,3 e Ø4,5
268-405

	17°		
	1,5mm	2,5mm	3,5mm
Standard Slim	241-021	241-022	241-023
	Ø 2,9	Ø 3,5	Ø 4,0 Ø 5,0
Short	247-021	247-022	247-023
	Ø 4,0	Ø 5,0	

	30°		
	1,5mm	2,5mm	3,5mm
Standard Slim	241-121	241-122	241-123
	Ø 2,9	Ø 3,5	Ø 4,0 Ø 5,0
Short	247-121	247-122	247-123
	Ø 4,0	Ø 5,0	



Munhão angulado 17° e 30° curto

Parafuso Munhão Ø3,3 e Ø4,5
268-405

	17°		
	1,5mm	2,5mm	3,5mm
Standard Slim	241-211	241-212	241-213
	Ø 2,9	Ø 3,5	Ø 4,0 Ø 5,0
Short	247-211	247-212	247-213
	Ø 4,0	Ø 5,0	

	30°		
	1,5mm	2,5mm	3,5mm
Standard Slim	241-311	241-312	241-313
	Ø 2,9	Ø 3,5	Ø 4,0 Ø 5,0
Short	247-311	247-312	247-313
	Ø 4,0	Ø 5,0	



Munhão angulado 17° e 30° longo

Parafuso Munhão Ø3,3 e Ø4,5
268-405

	17°		
	1,5mm	2,5mm	3,5mm
Standard Slim	241-221	241-222	241-223
	Ø 2,9	Ø 3,5	Ø 4,0 Ø 5,0
Short	247-221	247-222	247-223
	Ø 4,0	Ø 5,0	

	30°		
	1,5mm	2,5mm	3,5mm
Standard Slim	241-321	241-322	241-323
	Ø 2,9	Ø 3,5	Ø 4,0 Ø 5,0
Short	247-321	247-322	247-323
	Ø 4,0	Ø 5,0	

COMPONENTES





Prótese cimentada



MEDIDAS MUNHÃO ANGULADO

Ø3.3 mm

Ø4.5 mm

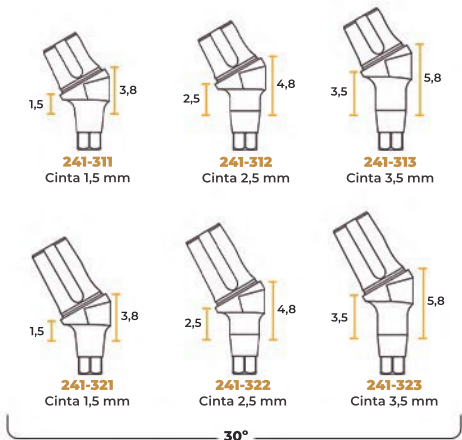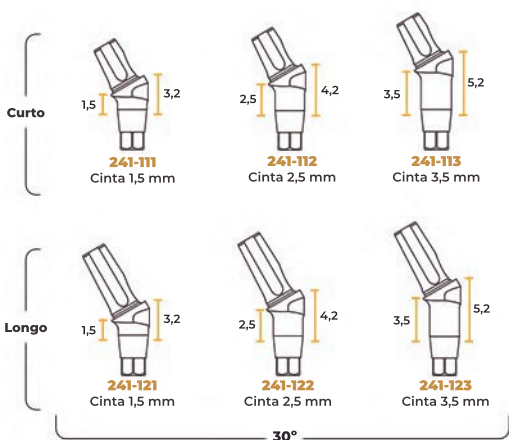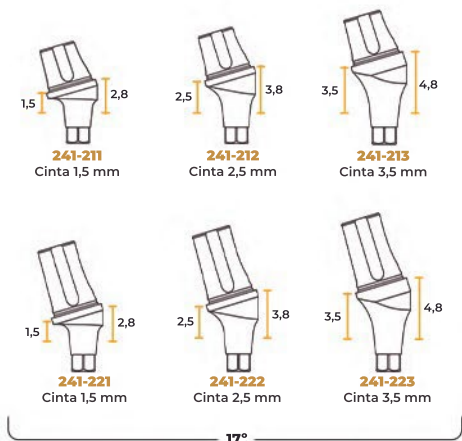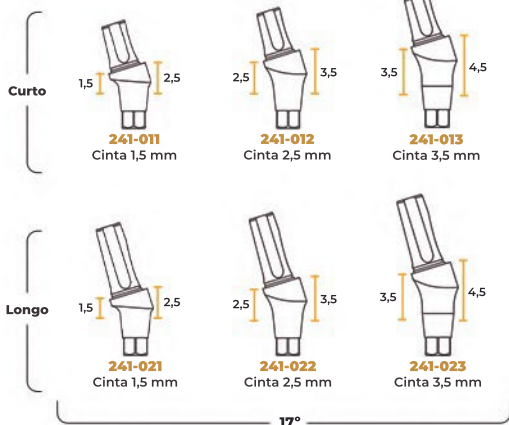



SEQUÊNCIA DE INSTALAÇÃO - MUNHÃO ANGULADO

SISTEMA ANALÓGICO



Transfer Munhão	
Curto	Longo
Ø3,3 221-021	221-023
Ø4,5 221-022	221-024



Análogo Munhão	
Curto	Longo
Ø3,3 219-300	219-301
Ø4,5 219-310	219-311

Opção cimentada



Ucla Calcínável Munhão	
Curto	Longo
Ø3,3 251-111	251-113
Ø4,5 251-112	251-114

Opção parafusada



Ucla Calcínável Munhão ANGULADO	
Curto	Longo
Ø3,3 251-131	251-133
Ø4,5 251-132	251-134

Acompanha Parafuso 261-402

20
Norm

SISTEMA DIGITAL LAB



Transfer Munhão	
Curto	Longo
Ø3,3 221-021	221-023
Ø4,5 221-022	221-024



Análogo Munhão	
Curto	Longo
Ø3,3 219-300	219-301
Ø4,5 219-310	219-311

Scanner mesa



Corpo Escaneamento Munhão	
Curto	Longo
Ø3,3 229-091	229-092
Ø4,5 229-093	229-094

SISTEMA DIGITAL INTRAORAL



Corpo Escaneamento Munhão	
Curto	Longo
Ø3,3 229-091	229-092
Ø4,5 229-093	229-094



Análogo Munhão	
Curto	Longo
Ø3,3 219-300	219-301
Ø4,5 219-310	219-311

COMPONENTES

Prótese cimentada/parafusada



TI-BASE



Para maior aderência entre Ti-Base e prótese, solicitar ao laboratório o jateamento da área de cimentação

· Com rosca interna para segurança do parafuso na instalação.

· Parafuso **261-310**.

· *Parafuso Cinta Zero **Short 261-404**.

30
N.cm Torque
Máximo

Reversibilidade
com o **Saca pilar**

Prótese
unitária

Acompanha
parafuso

Standard Slim

Ø 2,9

231-781

Ø 3,5

231-782

Ø 4,0

231-783

Ø 5,0

231-783

Cinta Zero* 1,5mm

231-784

2,5mm

231-785

3,5mm

231-786

4,5mm

231-787

5,5mm

231-788

Short

Ø 4,0 e Ø 5,0

238-783*

238-784

238-785

238-786

238-787

238-788

*Cone Morse não ativo

COMPONENTES

Prótese cimentada/parafusada



SEQUÊNCIA DE INSTALAÇÃO - TI-BASE

SISTEMA ANALÓGICO

Não se aplica

SISTEMA DIGITAL LAB



**Transfer Moldeira
Fechada CM**
228-013
Acompanha parafuso

ou

10
Ncm



**Transfer Moldeira
Aberta CM**
228-003
Acompanha parafuso



Análogo CM
Ø2,9 214-120
Ø3,5 211-130
Ø4,0 211-140
Ø5,0 211-150
Short Ø4,0 219-140
Ø5,0 219-150



**Corpo
Escaneamento
CM**
228-099
Acompanha parafuso

10
Ncm

SISTEMA DIGITAL INTRAORAL



**Corpo
Escaneamento
CM**
228-099
Acompanha parafuso

10
Ncm



Análogo CM
Ø2,9 214-120
Ø3,5 211-130
Ø4,0 211-140
Ø5,0 211-150
Short Ø4,0 219-140
Ø5,0 219-150


Short

COMPONENTES

Prótese cimentada/parafusada



PROVISÓRIO NÃO ROTACIONAL

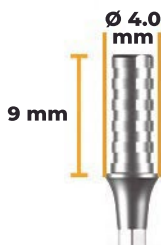

30 Torque
N.cm Máximo

 Reversibilidade
com o **Saca pilar**

- Com rosca interna para segurança do parafuso na instalação.
- Alturas de cimentação personalizáveis até 4mm.
- Parafuso **261-310**.

 Prótese
unitária

 Acompanha
parafuso

Standard Slim

Cinta **Zero*** 1,5mm 2,5mm 3,5mm

Ø 2,9

231-207

Ø 3,5

231-201

231-202

231-203

231-204

Ø 4,0

231-208

Ø 5,0

231-208

Short

Ø 4,0 e Ø 5,0

238-208

238-202

238-203

238-204


*Cone Morse não ativo

COMPONENTES

Prótese cimentada/parafusada



UCLA CoCr NÃO ROTACIONAL

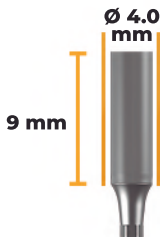

30 Torque
N.cm Máximo

Sem reversibilidade

- Com rosca interna para segurança do parafuso na instalação.
- Alturas de cimentação personalizáveis até 4mm.
- Parafuso **261-310**.

Prótese unitária

Acompanha parafuso

Standard Slim

Ø 2,9

251-007

Ø 3,5

251-001

Ø 4,0

251-008

Ø 5,0

251-008

Cinta Zero* 1,5mm

251-002

2,5mm

251-003

3,5mm

251-004

Short

Ø 4,0 e Ø 5,0

258-008

258-002

258-003

258-004

*Cone Morse não ativo

SEQUÊNCIA DE INSTALAÇÃO - PROVISÓRIO E UCLA CoCr NÃO ROT.

SISTEMA ANALÓGICO



Transfer Moldeira Fechada CM
228-013
Acompanha parafuso

ou



Transfer Moldeira Aberta CM
228-003
Acompanha parafuso

10
N.cm



Análogo CM
Ø2,9 214-120
Ø3,5 211-130
Ø4,0 211-140
Ø5,0 211-150
Short Ø4,0 219-140
Ø5,0 219-150

SISTEMA DIGITAL LAB

Não se aplica

SISTEMA DIGITAL INTRAORAL

Não se aplica

COMPONENTES

Prótese parafusada



TRANSMUCOSO UNIT 4.0



- Com rosca interna para segurança do parafuso na instalação;
- Rosca de aperto da prótese M2



30
N.cm Torque
Máximo



Reversibilidade
com o **Saca pilar**



Acompanha
parafuso



Protese
unitária

Standard Slim

Cinta Zero* 1,5mm 2,5mm 3,5mm 4,5mm 5,5mm

Ø 2,9

231-447

Ø 3,5

231-441

Ø 4,0

231-448

Ø 5,0

231-448

231-442

231-443

231-444

231-445

231-446

Parafusos

261-381

261-382

261-383

261-384

261-385

261-386

Short

Ø 4,0 e Ø 5,0

238-448

238-442

238-443

238-444

238-445

238-446

Parafusos

268-381

268-382

268-483

268-484

268-485

268-486

*Cone Morse não ativo

COMPONENTES

Prótese parafusada



TRANSMUCOSO UNIT 4.8



- Com rosca interna para segurança do parafuso na instalação;
- Rosca de aperto da prótese M2

30 Torque
N.cm Máximo

Acompanha
parafuso

Reversibilidade
com o **Saca pilar**

Protese
unitária

Standard Slim

Cinta **Zero*** 1,5mm 2,5mm 3,5mm 4,5mm 5,5mm

Ø 2,9

231-457

Ø 3,5

231-451

Ø 4,0

231-458

Ø 5,0

231-458

231-452

231-453

231-454

231-455

231-456

Parafusos

261-381

261-382

261-383

261-384

261-385

261-386

Short

Ø 4,0 e Ø 5,0

238-458

238-452

238-453

238-454

238-455

238-456

Parafusos

268-381

268-382

268-483

268-484

268-485

268-486

*Cone Morse não ativo



SEQUÊNCIA DE INSTALAÇÃO - TRANSMUCOSO UNIT

SISTEMA ANALÓGICO



10 N.cm



Transfer Moldeira Fechada não rotacional UNIT
226-040
Acompanha parafuso



Transfer Moldeira Aberta não rotacional UNIT
226-030
Acompanha parafuso

10 N.cm



Análogo Transmucoso UNIT
Ø4,0 216-500
Ø4,8 216-501



Provisório Não Rotacional UNIT
Ø4,0 236-253
Ø4,8 236-254
Acompanha parafuso 266-403



Ucla CoCr Não Rotacional UNIT
Ø4,0 256-041
Ø4,8 256-046
Acompanha parafuso 266-403

25 N.cm



Ucla Plástica Não Rotacional UNIT
Ø4,0 256-051
Ø4,8 256-053
Acompanha parafuso 266-403

SISTEMA DIGITAL LAB



10 N.cm



Transfer Moldeira Fechada não rotacional UNIT
226-040
Acompanha parafuso



Transfer Moldeira Aberta não rotacional UNIT
226-030
Acompanha parafuso

10 N.cm



Análogo Transmucoso UNIT
Ø4,0 216-500
Ø4,8 216-501

Scanner mesa



Corpo Escaneamento UNIT
226-098
Acompanha parafuso

10 N.cm



Ti-Base Não Rotacional UNIT
Ø4,0 236-490
Ø4,8 236-491
Parafuso - 266-403

25 N.cm

SISTEMA DIGITAL INTRAORAL



10 N.cm



Corpo Escaneamento UNIT
226-098
Acompanha parafuso

10 N.cm



Análogo Transmucoso UNIT
Ø4,0 216-500
Ø4,8 216-501



Ti-Base Não Rotacional UNIT
Ø4,0 236-490
Ø4,8 236-491
Parafuso - 266-403


25 N.cm

COMPONENTES

Prótese parafusada múltipla



MINI PILAR

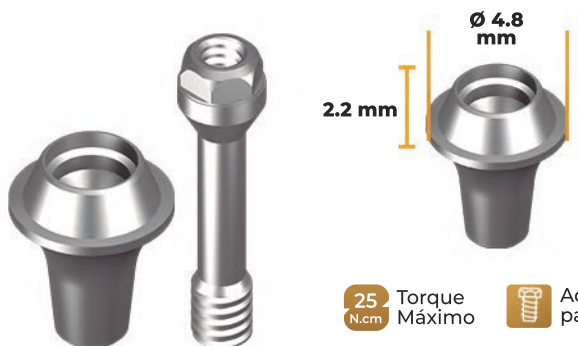

- Com rosca interna para segurança do parafuso na instalação;
- Rosca de aperto da prótese M1.4

25 Torque
N.cm Máximo

 Acompanha parafuso

 Reversibilidade com o **Saca pilar**

Standard Slim

Cinta Zero* 1,5mm 2,5mm 3,5mm 4,5mm 5,5mm

Ø 2,9

231-510

Ø 3,5

231-501

Ø 4,0

231-511

Ø 5,0

231-511

231-502

231-503

231-504

231-505

231-506

Parafusos

261-371

261-372

261-373

261-374

261-375

261-376

Short

Ø 4,0 e Ø 5,0

238-511

238-502

238-503

238-504

238-505

238-506

Parafusos

268-371

268-372

268-473

268-474

268-475

268-476

*Cone Morse não ativo

COMPONENTES

Prótese parafusada múltipla



MINI PILAR ANGULADO



- Com rosca interna para segurança do parafuso na instalação;
- Rosca de aperto da prótese M1.4
- Parafuso Standard e Slim

261-404

- Parafusos Short

***268-405**

****261-405**

25 N.cm Torque Máximo


Acompanha parafuso

Reversibilidade com o **Saca pilar**

17°			
Standard	1,5mm	2,5mm	3,5mm
Slim	241-431	241-432	241-433
	Ø 2,9	Ø 3,5	Ø 4,0
Short	247-431*	247-432**	247-433**
	Ø 4,0	Ø 5,0	

30°			
Standard	1,5mm	2,5mm	3,5mm
Slim	241-534	241-535	241-536
	Ø 2,9	Ø 3,5	Ø 4,0
Short	247-534*	247-535**	247-536**
	Ø 4,0	Ø 5,0	

MEDIDAS MINI PILAR ANGULADO

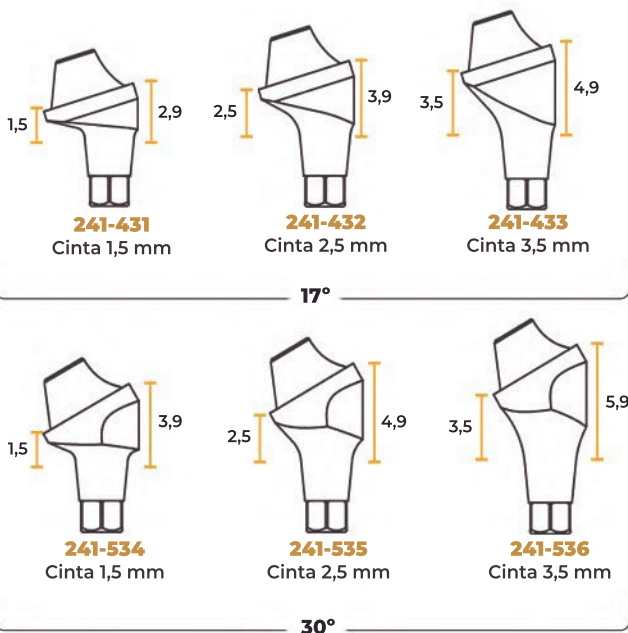

COMPONENTES

Prótese parafusada múltipla



SEQUÊNCIA DE INSTALAÇÃO - MINI PILAR

SISTEMA ANALÓGICO



**Protetor
transmucoso
Mini Pilar**
266-455

10
Ncm



**Transfer Moldeira
Fechada Mini Pilar**
226-060
Acompanha parafuso

ou



**Transfer Moldeira
Aberta Mini Pilar**
226-050
Acompanha parafuso

10
Ncm



**Análogo
Transmucoso
Mini Pilar**
216-700



**Provisório
Rotacional
Mini Pilar**
236-251
Acompanha parafuso
261-401

ou



**Ucla CoCr
Rotacional
Mini Pilar**
256-065
Acompanha parafuso
261-401

20
Ncm

ou



**Ucla Plástica
Rotacional
Mini Pilar**
256-074
Acompanha parafuso
261-401

SISTEMA DIGITAL LAB



**Protetor
Transmucoso
Mini Pilar**
266-455

10
Ncm



**Transfer Moldeira
Fechada Mini Pilar**
226-060
Acompanha parafuso

ou



**Transfer Moldeira
Aberta Mini Pilar**
226-050
Acompanha parafuso

10
Ncm



**Análogo
Transmucoso
Mini Pilar**
216-700

Scanner mesa



**Corpo
Escaneamento
Mini Pilar Ø4,8**
226-096
Acompanha parafuso

10
Ncm



**Ti-Base Rotacional
Mini Pilar Ø4,8**
236-592
Acompanha parafuso
266-401

20
Ncm

SISTEMA DIGITAL INTRAORAL



**Protetor
Transmucoso
Mini Pilar**
266-455

10
Ncm



**Corpo
Escaneamento
Mini Pilar Ø4,8**
226-096
Acompanha parafuso

10
Ncm



**Análogo
Transmucoso
Mini Pilar Ø3,5**
216-700



**Ti-Base Rotacional
Mini Pilar**
236-592
Acompanha parafuso
266-401

20
Ncm

COMPONENTES

Prótese parafusada múltipla



MICRO PILAR



- Com rosca interna para segurança do parafuso na instalação;
- Rosca de aperto da prótese M1.4

25 Torque
N.cm Máximo

Acompanha
parafuso

Reversibilidade
com o **Saca pilar**

Standard Slim

Cinta Zero* 1,5mm 2,5mm 3,5mm 4,5mm 5,5mm

Ø 2,9

231-610

Ø 3,5

231-601

Ø 4,0

231-611

Ø 5,0

231-611

231-602

231-603

231-604

231-605

231-606

Parafusos

261-361

261-362

261-363

261-364

261-365

261-366

Short

Ø 4,0 e Ø 5,0

238-611

238-602

238-603

238-604

238-605

238-606

Parafusos

268-361

268-362

268-463

268-464

268-465

268-466

*Cone Morse não ativo

COMPONENTES

Prótese parafusada múltipla



SEQUÊNCIA DE INSTALAÇÃO - MICRO PILAR

SISTEMA ANALÓGICO



Protetor transmucoso Micro Pilar
266-475

10 N.cm



Transfer Moldeira Fechada rotacional Micro Pilar
226-080

Acompanha parafuso

ou



Transfer Moldeira Aberta rotacional Micro Pilar
226-070

Acompanha parafuso

10 N.cm



Análogo Transmucoso Micro Pilar Ø3,5
216-900



Provisório Rotacional Micro Pilar
236-252

Acompanha parafuso 261-402

ou



Ucla CoCr Rotacional Micro Pilar
256-087

Acompanha parafuso 261-402

ou



Ucla plástica Rotacional Micro Pilar
256-095

Acompanha parafuso 261-402

25 N.cm

SISTEMA DIGITAL LAB



Protetor transmucoso Micro Pilar
266-475

10 N.cm



Transfer Moldeira Fechada rotacional Micro Pilar
226-080

Acompanha parafuso

ou



Transfer Moldeira Aberta rotacional Micro Pilar
226-070

Acompanha parafuso

10 N.cm



Análogo Transmucoso Micro Pilar Ø3,5
216-900

Scanner mesa



Corpo Escaneamento Micro Pilar
226-095

Acompanha parafuso

10 N.cm



Ti-Base Rotacional Micro Pilar
236-693

Acompanha parafuso 266-402

20 N.cm

SISTEMA DIGITAL INTRAORAL



Protetor transmucoso Micro Pilar
266-475

10 N.cm



Corpo Escaneamento Micro Pilar
226-095

Acompanha parafuso

10 N.cm



Análogo Transmucoso Micro Pilar Ø3,5
216-900



Ti-Base Não Rotacional Micro Pilar
236-693

Acompanha parafuso 261-402

20 N.cm



PILAR O'RING



- Com rosca interna para segurança do parafuso na instalação;
- Chave hexagonal de canhão: curta **270-041** média **270-042**.

30 Torque
N.cm Máximo

Acompanha
parafuso

Reversibilidade
com o **Saca pilar**

Standard Slim

Ø 2,9

231-301

Ø 3,5

231-308

Ø 4,0

231-308

Ø 5,0

231-307

Cinta **Zero*** 1,5mm

231-302

2,5mm

231-303

3,5mm

231-304

4,5mm

231-305

5,5mm

231-306

Parafusos

261-391

261-392

261-393

261-394

261-395

261-396

Short

Ø 4,0 e Ø 5,0

238-308

238-302

238-303

238-304

238-305

238-306

Parafusos

268-391

268-392

268-393

268-394


268-395

268-396

*Cone Morse não ativo



MINI PILAR DE RETENÇÃO O'RING CALCINÁVEL

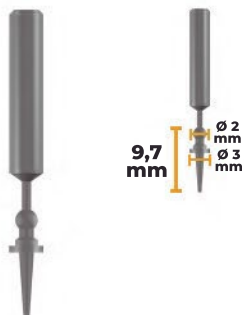

- Pode ser fundido com uma barra de fixação ou com o núcleo de um dente natural;
- Totalmente calcinável.

230-344

30 Torque
N.cm Máximo

SEQUÊNCIA DE INSTALAÇÃO - PILAR O'RING



Cápsula espaçadora
230-322



Mini Fêmea O'Ring
230-300



Anel Espaçador
230-311

Anel de reposição



Anel O'Ring
230-335

KIT CIRÚRGICO HIS



Com estojo leve e de fácil manuseio, tornando também o kit muito mais versátil, prático e didático. Assim, apresenta a melhor relação custo/benefício do mercado. Associado a conhecimento técnico e pesquisas científicas a Medens priorizou a versatilidade e praticidade que caracteriza todo o sistema.

O Kit cirúrgico do HIS permite a instalação de todas as linhas de implantes Medens, HIS, Novo Colosso: Cone Morse, Hexágono Externo e a linha Evolution: Hexágono Interno.

O que caracteriza um kit cirúrgico completo. Com instrumentos essenciais para a execução do primeiro tempo cirúrgico, vem acompanhado de Chaves e Intermediários em três tamanhos, Curto, Médio e Longo para a inserção dos implantes do Sistema em qualquer condição clínica.

280-001

ITENS

280-901	Estojo Kit Cirúrgico
270-701	Torquímetro Universal
270-200	Prolongador de Brocas
270-130	Montador Mini Pilar Ângulado
170-610	Paraf. Saca Pilar Novo Colosso
270-611	Paraf. Saca Pilar HIS
270-301	Paralelôm. e Profundim. Ø3,5 (2)
270-302	Paralelôm. e Profundim. Ø4,0 (2)
270-303	Paralelôm. e Profundim. Ø5,0 (2)
270-211	Broca Lança Ø2,0
270-212	Broca Implante Ø2,9
270-213	Broca Implante Ø3,5 Sub
270-214	Broca Implante Ø3,5
270-215	Broca Implante Ø4,0 Sub
270-216	Broca Implante Ø4,0
270-217	Broca Implante Ø5,0 Sub
270-218	Broca Implante Ø5,0

270-480	Macho de Rosca Ø3,4
270-481	Macho de Rosca Ø3,9
270-482	Macho de Rosca Ø4,9
270-041	Chave Hexagonal Curta 2,0
270-042	Chave Hexagonal Média 2,0
270-111	Chave Hexagonal Curta 1,2
270-112	Chave Hexagonal Média 1,2
270-113	Chave Hexagonal Longa 1,2
271-014	Chave Instalação Curta CM 2,0
271-015	Chave Instalação Média CM 2,0
271-016	Chave Instalação Longa CM 2,0
270-021	Chave Instalação Curta HE 2,1
270-022	Chave Instalação Média HE 2,1
270-023	Chave Instalação Longa HE 2,1
270-031	Chave Instalação Curta HI 2,4
270-032	Chave Instalação Média HI 2,4
270-033	Chave Instalação Longa HI 2,4
270-702	Engrenagem Torquímetro


INSTRUMENTAL CIRÚRGICO



Marcações a laser que fazem referência aos comprimentos dos implantes.

BROCAS DIAMOND

Confeccionadas em aço inoxidável temperado, as brocas da Medens, proporcionam uma perfeita perfuração. Com diâmetros escalonados e perfil igual a macroestrutura dos implantes Medens gera menos atrito, consequentemente menos calor, oferecendo ao cirurgião dentista muito mais segurança no ato cirúrgico.

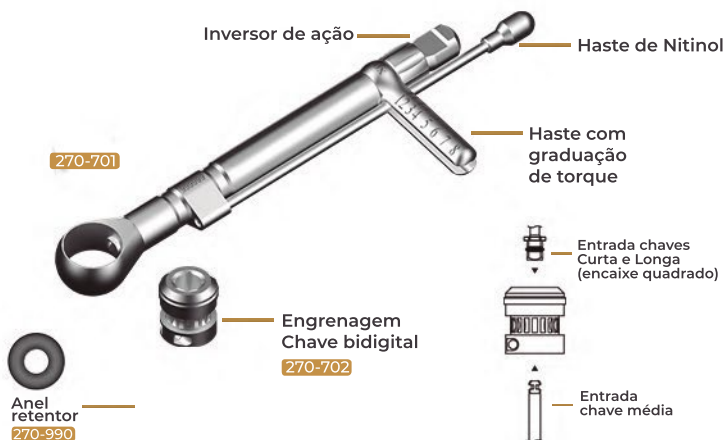

TORQUÍMETRO

O Torquímetro vem com engrenagem removível, que pode ser utilizada como chave bidigital. A engrenagem possui dois encaixes, de um lado um encaixe compatível com contra ângulo e do outro lado tem o encaixe quadrado padrão universal de 3,9mm. Com haste graduada de 10N.cm a 80N.cm e marcação angulada, facilita a mensuração do toque cirúrgico e protético. Pode ser utilizado como chave de catraca, torquímetro, chave bidigital de acordo com cada necessidade clínica.

INSTRUMENTAL CIRÚRGICO



CHAVE HEXAGONAL 1,2 MM

Conectadas a engrenagem/chave bidigital, torquímetro ou contra ângulo, aciona todos os parafusos do Sistema. (cirúrgicos e laboratoriais)



CHAVE DE INSTALAÇÃO CM/HIS 2,0 MM

Conectadas a engrenagem/chave bidigital, torquímetro ou contra ângulo, aciona todos os parafusos do Sistema. (cirúrgicos e laboratoriais)



CHAVE DE INSTALAÇÃO HE 2,1 MM

Coletam os implantes Hexágono Externo da embalagem e são acionados por engrenagem/chave bidigital, torquímetro, ou contra ângulo para dar continuidade à colocação do implante.



CHAVE DE INSTALAÇÃO HI 2,4 MM

Coletam os implantes Evolution Hexágono Interno da embalagem e são acionados por engrenagem/chave bidigital, torquímetro, ou contra ângulo para dar continuidade à colocação do implante.

INSTRUMENTAL CIRÚRGICO



Curta
270-480

Média
270-481

Longa
270-482

MACHOS DE ROSCA

Utilizados em ossos de maior densidade (Tipo I e II) logo após a última broca de cada implante conforme protocolo.



Ø3,5mm
270-301

Ø4,0mm
270-302

Ø5,0mm
270-303

PARALELÔMETROS

Utilizados após a broca 2,0mm como referência para a confecção das perfurações. Agora possuem anel com diâmetro dos implantes para verificação da disponibilidade óssea.



Novo Colosso
170-610

HIS
270-611


SACA PILARES

Utilizado para soltar os pilares dos implantes Cone Morse da linha Novo Colosso e da linha HIS quando houver necessidade.

Como usar o saca pilar

1. Após retirar o parafuso do pilar que está encaixado no implante, insira o saca pilar.
2. Gire o saca pilar para a direita, movendo-o para baixo. Esse movimento irá desencaixar o pilar do implante.
3. Após o desencaixe, puxe o pilar para cima para removê-lo.

Seguindo esses passos, você conseguirá remover o pilar de forma eficiente.

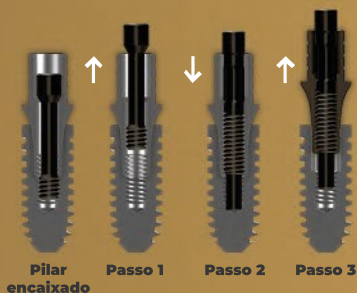

Assista ao vídeo para
melhor entendimento

INSTRUMENTAL CIRÚRGICO



270-130



Curta

270-041



Média

270-042



270-200

MONTADOR DO MINI PILAR ANGULADO

Utilizado para transportar e auxiliar a colocação e instalação do pilar em boca.

CHAVE HEXAGONAL 2.0

Utilizadas para a instalação do Mini Pilar Padrão 4,8mm

PROLONGADOR DE BROCA/CHAVES DE INSTALAÇÃO


Permite aumentar o comprimento das brocas/intermediários, viabilizando acesso em regiões onde a cabeça do contra ângulo não pode atuar por sua impacção nos dentes adjacentes.

Obs.: Ao executar a perfuração com o prolongador a broca deve ser sempre retirada do alvéolo em rotação.

STOP FALL

Os componentes protéticos HIS possuem uma rosca interna que permite o pré-rosqueamento do parafuso, evitando que ele caia durante o movimento da instalação da prótese.

Assista ao vídeo para melhor entendimento

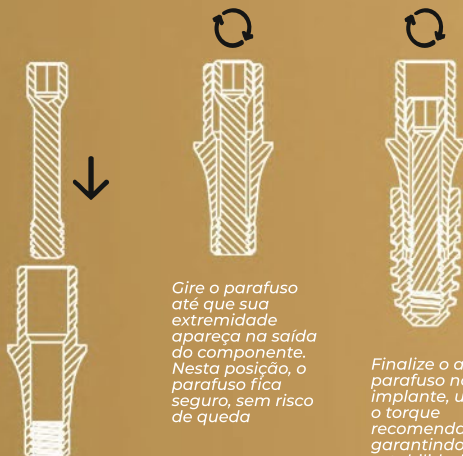

Gire o parafuso até que sua extremidade apareça na saída do componente. Nesta posição, o parafuso fica seguro, sem risco de queda

Finalize o aperto do parafuso no implante, utilizando o torque recomendado, garantindo a estabilidade do conjunto.

Rosca para utilização do sistema Stop Fall e Saca pilar

medens 
alliage